


SENSOR UND SOFTWARE FÜR ALLE FÄLLE

DEXIS® Software – Wir können mit jedem!

Die DEXIS® Software ist eine hoch-effektive Hilfe in der zahnärztlichen Diagnostik, in der Therapie-Planung, bei der Behandlung und im Patientengespräch. Die einzelnen Programme sind intuitiv und einfach zu bedienen und dennoch außerordentlich leistungsfähig. Ein umfangreicher Satz an Bildbearbeitungswerkzeugen unterstützt die klinische Diagnose, hilft bei der Identifikation von apicalen und kariösen Läsionen, Wurzelspitzen und -kanälen, Randspalten, Knochenabbau und Furkationen.

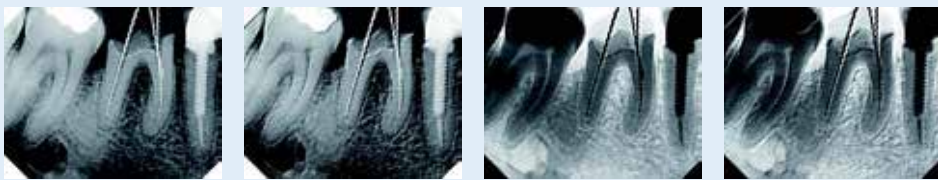

Ein Beleg für die ausgezeichnete Ergonomie und Bedienungsfreundlichkeit der DEXIS® Software ist die „1-Klick Status-Aufnahme“. Mit ihr wird die konventionelle Status-Aufnahme-Prozedur von 25 Minuten in weniger als fünf Minuten abgeschlossen. Sobald der Sensor Strahlung erkennt, wird das Röntgenbild automatisch gespeichert, datiert, die Zahnnummer hinterlegt und die Aufnahme korrekt ausgerichtet. Die Aufnahmen sind unmittelbar nach der Exposition verfügbar, ohne Wartezeiten für Entwicklung oder Einscannen.

Das wichtigste jedoch ist: Die DEXIS® Software kann mit jedem! Sie ist in der Lage – herstellerunabhängig – alle bildgebenden digitalen Systeme – von der Intraoralkamera über den Abdruckscanner bis zum OPG – zu integrieren. So arbeiten Sie mit nur einer einzigen Bildverwaltungs-, Archivierungs- und Bildbearbeitungs-Software und können alle Röntgenbilder und Bilddokumente zum Patienten in einer einzigen übersichtlichen Ansicht gleichzeitig beurteilen.



Mit DEXIS® ist es darüber hinaus möglich, das Röntgenbildarchiv an alle modernen Praxisverwaltungsprogramme anzubinden.

So wird durch DEXIS® gewährleistet, dass Ihre Röntgenbilder stets sicher und korrekt dem richtigen Patienten zugeordnet sind und ebenso schnell und einfach gefunden werden. Auch ist – falls gewünscht – eine direkte Bildvorschau unmittelbar auf Ihrer Abrechnungssoftware möglich.

Module zur optimalen Anpassung an die Praxissituation

DEXnet™

Die Mehrplatzversion erlaubt den Einsatz der DEXIS® Software und aller Zusatzmodule an einer unbegrenzten Zahl lokal vernetzter Arbeitsplätze. So sind alle Röntgenbilder und Bilddokumente stets überall sofort verfügbar.

DEXimage™

Das Modul für den Einsatz einer intraoralen Videokamera, eines digitalen Fotoapparates oder eines Mikroskopes ermöglicht die einheitliche Bilderablage in DEXIS®. So sehen Sie gleichzeitig alle Bilddokumente zum Patienten.

DEXscan™

Mit diesem Modul kann ein Scanner mit Durchlichtaufsatz an DEXIS® angebunden und für die digitale Archivierung konventioneller Röntgenaufnahmen genutzt werden. DEXscan kann u.a. ganze Bildserien automatisch einscannen.

DEXimplant™

Ein leistungsstarkes Instrument zur Implantatplanung und -kontrolle. Dank einer Knochendichte-Auswertung macht der Vergleich von älteren und jüngeren Aufnahmen die Nachkontrolle zur Implantatversorgung deutlich sicherer.

DEXwrite™

Ein einfach zu handhabendes Hilfsmittel für die Arzt- und Befundbriefschreibung. Es ermöglicht eine schnelle und sichere Integration aller Röntgenbilder und Bilddokumente in den Arztbericht und die Nutzung vorgefertigter Berichtsmuster.

DEXlink™

Dieses Modul sorgt für eine universelle Anbindung an jede Praxisverwaltungssoftware. Es erlaubt die Bildvorschau und gewährleistet die sichere und korrekte Zuordnung Ihrer Röntgenbilder.

DEXpan™

DEXIS® integriert herstellerunabhängig jedes digitale OPG/CEPH. So arbeiten Sie mit einer einzigen Bildverwaltungs- und Archivierungs-Software und haben dabei Zugriff auf alle Aufnahmen.

DEXdvt™

Diese Erweiterung unterstützt die Anbindung eines DVT-Gerätes, startet das Gerät aus der DEXIS® Software und ruft die erzeugten 3D-Aufnahmen mit dem 3D-Viewer aus DEXIS® heraus auf. DVT-Scans werden patientenbezogen abgelegt.

DEXserv™

Das Servermodul für Filial-Installationen. Diese herausragende Softwarelösung gewährleistet gemeinsam mit den Modulen DEXclient™ und DEXsync™ eine Filial-Integration mit sicherem und schnellem Daten- und Bildaustausch.

DEXimpression™

Dieses Modul ermöglicht die Ablage eines digitalen Abdrucks mit einem Intraoralscanners direkt beim Patienten.

DEXgo™

Mit DEXgo können Sie Ihre Röntgenbilder mit einem Windows-Tablet in der Praxis mobil und ohne Netzwerk nutzen.



DIGITALE ERGONOMIE *für die* DIGITALE PRAXIS



Das Systemhaus für die Medizin

FIRMENSITZ HALLE (SAALE)

Walther-Rathenau-Str. 4
06116 Halle (Saale)
Tel.: 0345-298419-0
Hotline: 0345-298419-40
Fax: 0345-298419-60
E-Mail: info@ic-med.de

IC MED AKADEMIE

Walther-Rathenau-Str. 20
06116 Halle (Saale)
Tel.: 0345-298419-0
Fax: 0345-298419-60

NIEDERLASSUNG NORD

Germaniastraße 18/20
12099 Berlin
Tel.: 030-72014108
Fax: 030-72012091
E-Mail: info@ic-med.de

NIEDERLASSUNG OST

Europark/Schulstr. 38
09125 Chemnitz
Tel.: 0371-54307-02
Fax: 0371-54307-04
E-Mail: info@ic-med.de

NIEDERLASSUNG MITTE

Amperestr. 1c
64625 Bensheim
Tel.: 06251-987-1896
Fax: 06251-987-6648
E-Mail: info@ic-med.de

NIEDERLASSUNG OST

Löbtauer Straße 44-48
01159 Dresden
Tel.: 0351-48125-15
Fax: 0351-48125-22
E-Mail: bd@ic-med.de

NIEDERLASSUNG WEST

Am Wiesenbusch 1
45966 Gladbeck
Tel.: 02043-37850-37
Fax: 02043-37850-36
E-Mail: info@ic-med.de

NIEDERLASSUNG SÜDWEST

Bismarckstr. 64
78647 Trossingen
Tel.: 07425-3399615
Fax: 07425-3393770
E-Mail: info@ic-med.de

SICHERHEIT IN DER KARIESERKENNUNG

DEXIS® CariVu – genial einfach
und innovativ

CAD/CAM LÖSUNGEN: DER DIGITALE ABDRUCK

Einfach, präzise und komplett offen
CS 3500 Intraoralscanner

DIGITALE RÖNTGENLÖSUNGEN

Sowohl 2D- als auch
3D-DVT-Technologien

SENSOR UND SOFTWARE FÜR ALLE FÄLLE

DEXIS® Platinum –
Wir können mit jedem!