



Aushärtung mit einem Tastendruck am Behandlungsstuhl

ProCure 2 wurde präzise entwickelt, um die besten mechanischen Eigenschaften aus Ihren 3D-Drucken herauszuholen. Die vorprogrammierten Harzprofile liefern genau die richtige Menge an Wärme und Licht.

In Verbindung mit den Pro S 3D-Druckern und Mit Pro Wash/Dry können Sie in weniger als einer Stunde vom Scan bis zur Auslieferung übergehen.



SprintRay

2705 Media Center Drive, Suite #100A
Los Angeles, CA 90065

www.sprinray.com
info@sprinray.com



ProCure 2

D A S F O R T S C H R I T T L I C H S T E N A C H H Ä R T E S Y S T E M

SCHNELL

Aushärtung vieler Teile in 2
Minuten mit speziellem
UVA-Lichtgerät

LEISTUNGSFÄHIG

25-mal höhere Lichtintensität
als andere ushärtungsprodukte

EINFACH

Benutzerfreundlich und
ergonomisch, auf die Bedürfnisse
der Zahnmedizin abgestimmt



Stand der Technik

ProCure 2 ist schnell. Schnell genug, um echte Workflows am Behandlungsstuhl mit SprintRay 3D-Druck zu ermöglichen. Und dank seines speziellen Lichtmotors gibt er sofort Wärme ab, ohne dass ein Aufwärmen erforderlich ist. Willkommen bei Chairside.



Führen durch Design

Das Herzstück von ProCure 2 ist das UVA-Lichtmodul, das von Grund auf neu entwickelt wurde, um unsere strengen Anforderungen am Behandlungsstuhl zu erfüllen. Seine einzigartige reieckskonstruktion ermöglicht eine Aushärtungsabdeckung von 360 Grad.

25mal höhere Lichtintensität

25mal

leistungsfähiger

Dank seines speziellen Aushärtungsmechanismus kann ProCure 2 3D-gedruckte Dentalteile in nur wenigen Minuten vollständig aushärten und dabei sowohl Licht als auch Wärme für optimale mechanische Eigenschaften nutzen.




Sofortige Erwärmung

Da ProCure 2 konzentriertes 385nm-Licht abgibt, erzeugt es lokal an jedem Teil Wärme. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer Umgebungserwärmung, was die Gesamtaushärtungszeit erheblich verkürzt.



Aktive Thermodynamik

Hervorragende Technik sorgt dafür, dass ProCure 2 immer die richtige Temperatur hat. Aktive und passive Thermodynamik arbeiten in perfekter Harmonie, damit sich das Äußere kühl anfühlt.

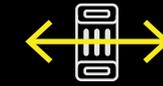

Kammer-Scanning

Das Lichtsystem von ProCure 2 scannt sanft über die Aushärtekammer, um sicherzustellen, dass jedes Teil gleichmäßig und gründlich nachgehärtet wird.

12mal schneller Okklusionsschützer

4 Min ProCure 2

65 Min ProCure 1

10mal schneller Dentalmodelle

2 Min ProCure 2

20 Min ProCure 1

10mal schneller Chirurgische Führungen

2 Min ProCure 2

20 Min ProCure 1

13mal schneller Vollbogen-Implantat-Prothesen

5 Min ProCure 2

65 Min ProCure 1

15mal schneller Indirekte Bonding Trays

2 Min ProCure 2

35 Min ProCure 1

10mal schneller Zahnersatz zur Probe

2 Min ProCure 2

20 Min ProCure 1

Geschätzte Zeit mit ProCure 2 und SprintRay-Harzen. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Anzahl der Modelle, Harzmarke, Umgebung und anderen Einstellungen.